

Инструкция по установке и использованию плагина второй версии для печати в web-браузере Mozilla Firefox

Выгрузить в Word

Краткое наименование модуля	Инструкция по установке и использованию плагина второй версии для печати в web-браузере Mozilla Firefox
Полное наименование модуля	Инструкция по установке и использованию плагина второй версии для печати в web-браузере Mozilla Firefox
Продукт	МИС
Тип документа	Инструкция
Статус документа	АКТУАЛЬНО
Карточка модуля	
Ответственный техписатель	
Текущая задача в Jira	

- [Перечень терминов и сокращений](#)
- [Установка плагина misDesktopApp2.0 для ОС Windows](#)
- [Установка плагина misDesktopApp2.0 для ОС Linux](#)
- [Настройка плагина misDesktopApp2.0](#)
- [Обновления плагина misDesktopApp2.0](#)

Термины и сокращения, используемые в документе, приведены в таблице ниже.

Термины и сокращения


Термин, сокращение	Определение
ПК	Персональный компьютер
МИС	Медицинская информационная система

Примечание – Чтобы узнать разрядность операционной системы ПК, на рабочем столе в левом нижнем углу перейдите в пункт "Пуск" → "Параметры" → "Система" → "О системе". В окне "Характеристики устройства" найдите строку "Тип системы".


Характеристики устройства	
HP ProBook 450 G6	
Имя устройства	BI-NB-183
Процессор	Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
Оперативная память	8,00 ГБ (доступно: 7,87 ГБ)
Код устройства	F81A5E74-E7D1-4E93-99A2-5319D464879D
Код продукта	00330-52839-57879-AAOEM
Тип системы	64-разрядная операционная система, процессор x64
Перо и сенсорный ввод	Для этого монитора недоступен ввод с помощью пера и сенсорный ввод

Для установки плагина печати misDesktopApp 2.0 для web-браузера "Mozilla Firefox":


- Скачайте windows_installer.zip и его тома по следующим ссылкам: [win64](#), [win32](#) (в зависимости от разрядности системы). Запуститься мастер установки.

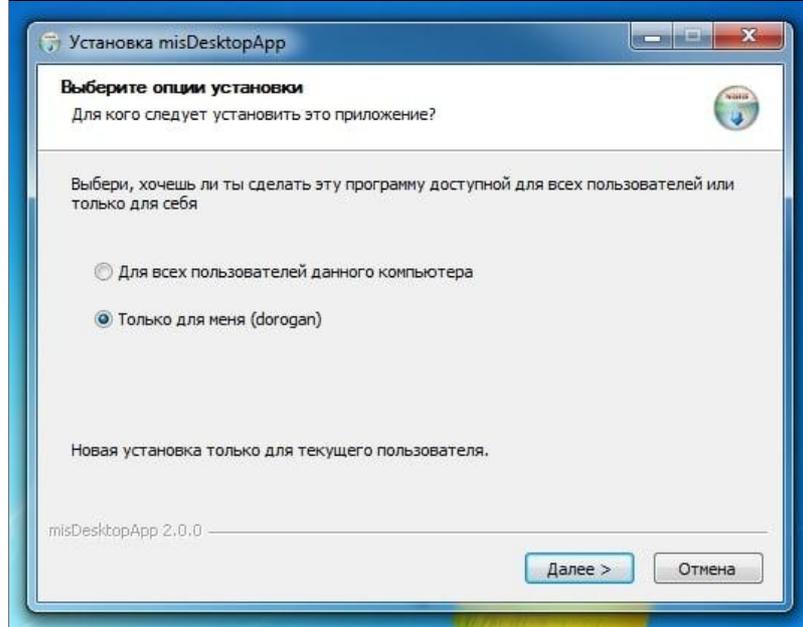


- Выберите тип установки: для всех пользователей компьютера или только для текущего пользователя.
- Нажмите кнопку "Далее" для перехода к следующему шагу мастера установки.

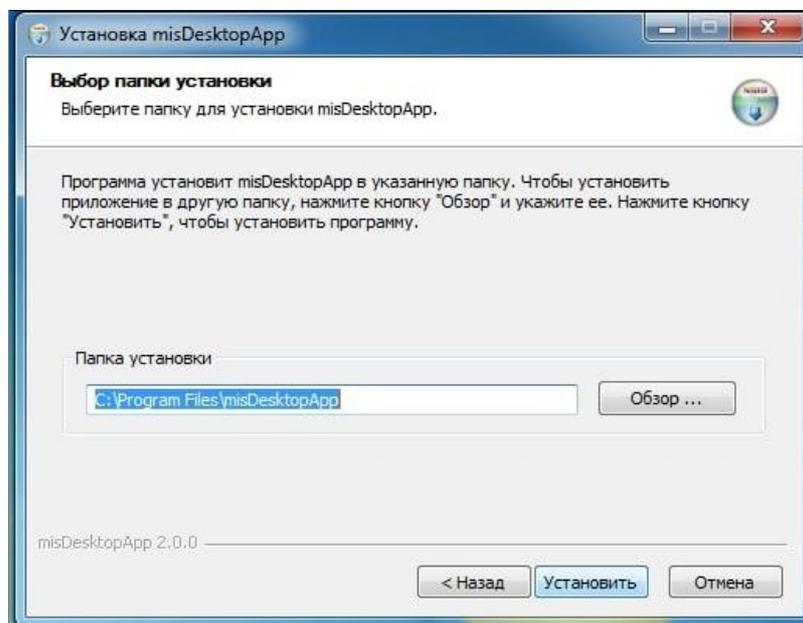

- Укажите директорию установки с помощью кнопки "Обзор".
- Нажмите на кнопку "Установить" для запуска процесса установки.

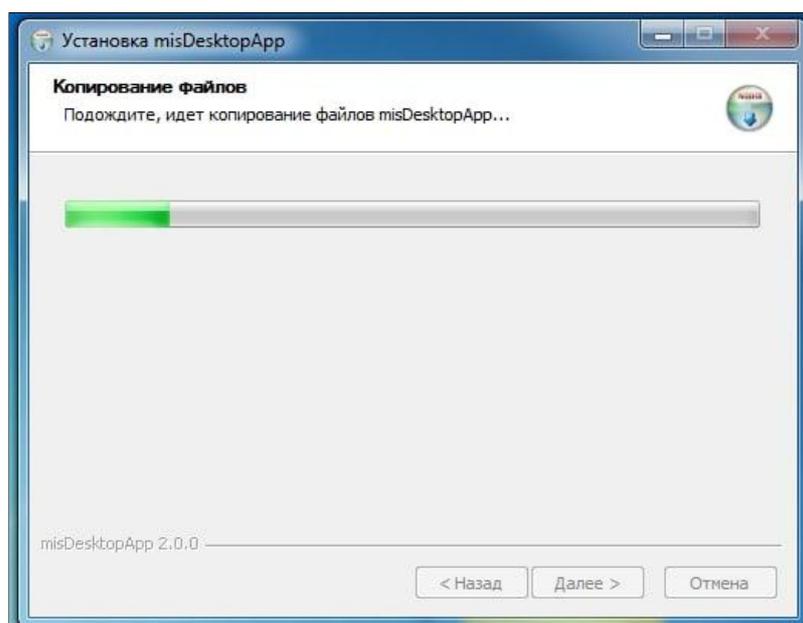

- Нажмите на кнопку "Готово" для завершения работы мастера установки.

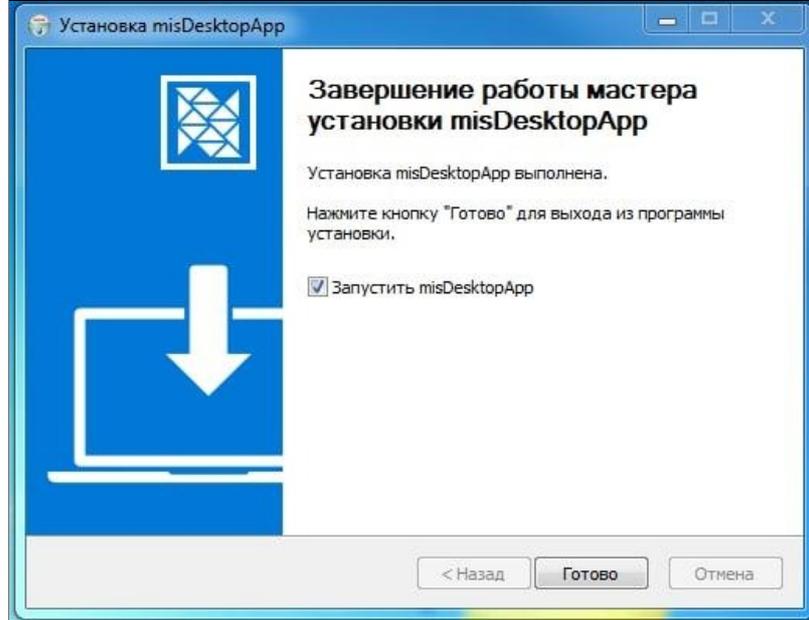

Для установки плагина печати misDesktopApp 2.0:

- Запустите терминал.
- Определите разрядность операционной системы, введя команду:

```
uname -m
```

```
ilnar@MED-BAGMANOV:~$ uname -m
x86_64
ilnar@MED-BAGMANOV:~$
```

- Скачайте приложение по следующим ссылкам: [linux64](#), [linux32](#) (в зависимости от разрядности системы). На примере выше – разрядность 64.
- Перейдите в каталог загрузки, введя команду:

```
cd ~/Downloads/
```

```
ilnar@MED-BAGMANOV: ~/Downloads
ilnar@MED-BAGMANOV:~/Downloads$ cd ~/Downloads/
ilnar@MED-BAGMANOV:~/Downloads$
```

- Создайте каталог в /opt/misdesktopapp, введя команду:

```
sudo mkdir /opt/misdesktopapp
```

```
ilnar@MED-BAGMANOV: ~/Downloads
ilnar@MED-BAGMANOV:~/Downloads$ sudo mkdir /opt/misdesktopapp
[sudo] password for ilnar:
ilnar@MED-BAGMANOV:~/Downloads$
```

- Скопируйте приложение в созданный каталог, введя команду:

```
sudo cp misDesktopApp-2.0.0.AppImage /opt/misdesktopapp/misDesktopApp-2.0.0.AppImage
```

```
ilnar@MED-BAGMANOV: ~/Downloads
ilnar@MED-BAGMANOV:~/Downloads$ sudo cp misDesktopApp-2.0.0.AppImage /opt/misdesktopapp/misDesktopApp-2.0.0.AppImage
ilnar@MED-BAGMANOV:~/Downloads$
```

- Перейдите в каталог /opt/misdesktopapp, введя команду:

```
cd /opt/misdesktopapp/
```

```
ilnar@MED-BAGMANOV: /opt/misdesktopapp
ilnar@MED-BAGMANOV:/opt/misdesktopapp$ cd /opt/misdesktopapp/
ilnar@MED-BAGMANOV:/opt/misdesktopapp$
```

- Сделайте файл misDesktopApp-2.0.0.AppImage запускаемым для всех пользователей, введя команду:

```
sudo chmod ugo+x misDesktopApp-2.0.0.AppImage
```

```
ilnar@MED-BAGMANOV: /opt/misdesktopapp
ilnar@MED-BAGMANOV:/opt/misdesktopapp$ sudo chmod ugo+x misDesktopApp-2.0.0.AppImage
ilnar@MED-BAGMANOV:/opt/misdesktopapp$
```

- Запустите приложение, введя команду:


```
./misDesktopApp-2.0.0.AppImage
```

```
ilnar@MED-BAGMANOV:/opt/misdesktopapp$ ./misDesktopApp-2.0.0.AppImage
```


При первого запуске приложения открывается окно выбора сервера. Указание сервера является обязательным, поскольку данная настройка необходима для получение обновления.

Для этого:


- Нажмите на кнопку "Продолжить..."

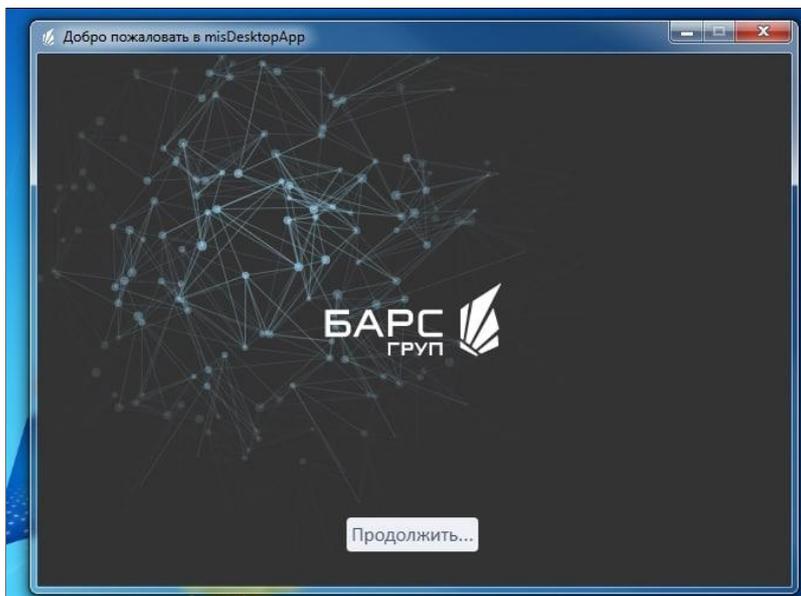

- Укажите адрес web-сервера в Томской области: <http://mis.med/d3>

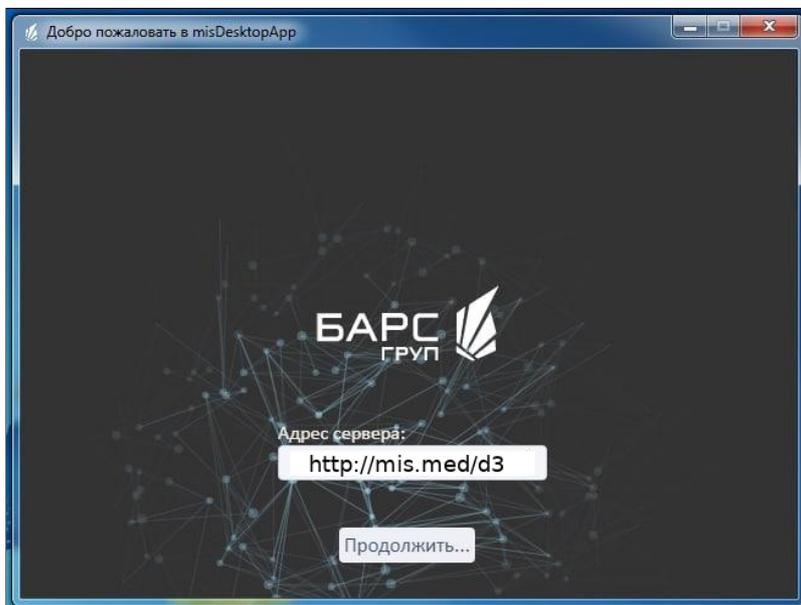


- Нажмите на кнопку "Продолжить...". Если приложению удалось подключиться к web-серверу и загрузить обновления, то отобразится сообщение "Система обновилась до версии ...".

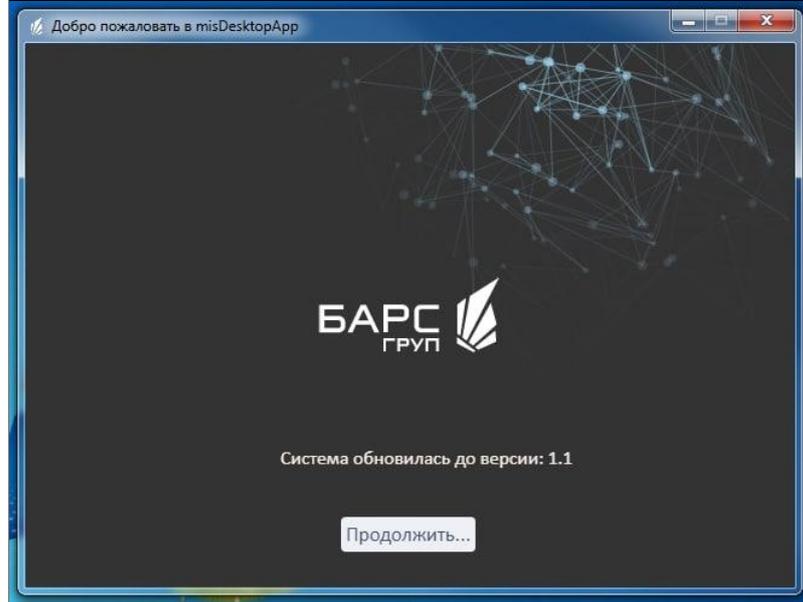


- Нажмите на кнопку "Продолжить...". Приложение закроется.
- Запустите приложение повторно.


Чтобы обновить плагина misDesktopApp2.0 нажмите правой кнопкой мыши на иконку плагина в трее ОС и выберите пункт "Обновление".

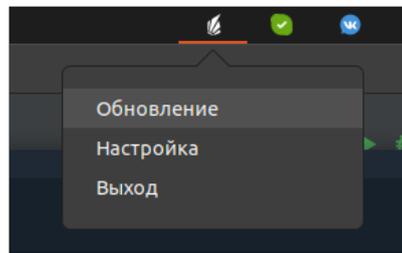

Если новая версия не найдена, система выдаст сообщение "Приложение обновлено до последней версии".

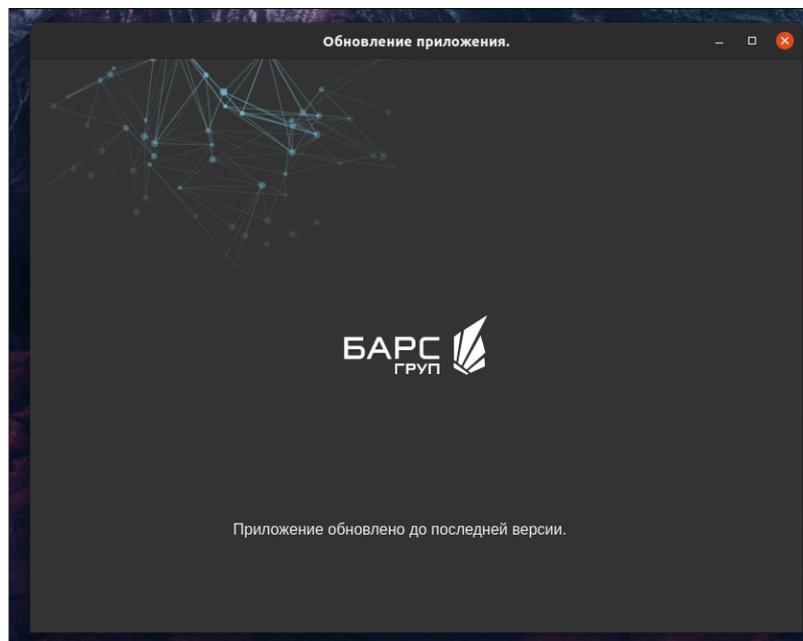

Если вышла новая версия плагина, то система выдаст сообщение "Доступна новая версия: ...". Для обновления нажмите на кнопку "Обновить". После обновления приложение закроется и для продолжения работы необходимо запустить его повторно.

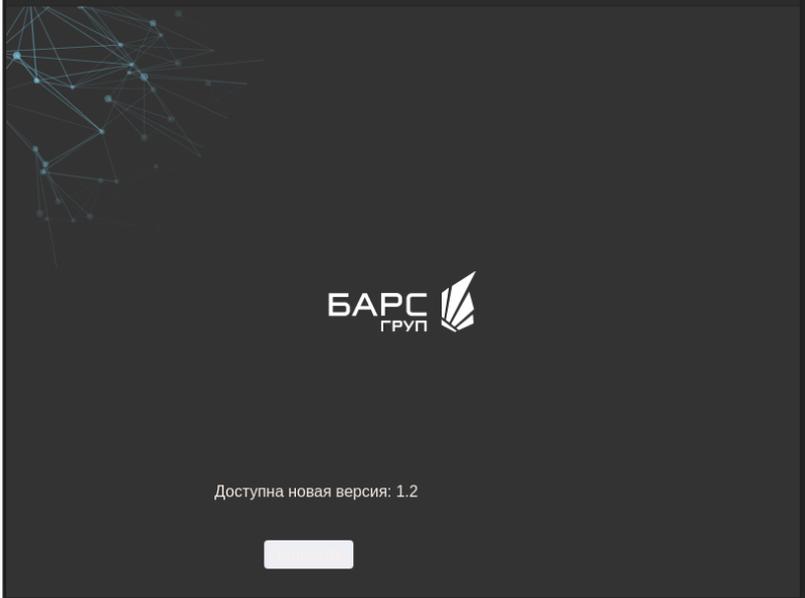

Доступна новая версия: 1.2

